



МАССАЖЕР ZET-827

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V
Мощность	24W


Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Обеспечит комфортный массаж спины на работе, дома и в пути.
2. Накладка подстраивается под форму спины.
3. Вибрационный массаж.
4. Функция нагрева.
5. Адаптер для использования в автомобиле.
6. Таймер: 15 минут в автоматическом режиме

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. Нажмите кнопку питания «POWER» для включения массажёра.
3. Кнопками для массажа и обогрева выберите подходящую вам функцию.
4. По окончании массажа выключите прибор и отсоедините адаптер от источника питания

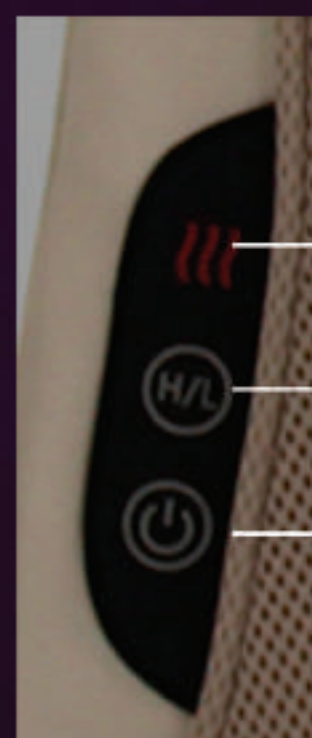

Функция обогрева

Направление массажных
роликов (вверх / вниз)

Вкл/выкл

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____